

Utilisations prévues

Les Barres d'Appui de Lit permettent ou augmentent l'indépendance pour entrer et sortir du lit en étant allongé, en particulier en compensant la mobilité réduite ou l'invalidité.

Description

Aider le transfert dans et en dehors du lit sur un côté du lit. Cette structure est dotée d'un grand châssis et d'une sangle réglable pour une excellente stabilité et sécurité. Les Barres d'Appui de Lit conviennent à la fois aux lits à lattes et aux canapé-lits.

Instruction d'utilisation


1. Enlevez les goupille-épingles noires de la poignée et poussez l'extrémité des tubes de la poignée dans les tubes du devant du châssis.
2. Remplacez les goupille-épingles noires sur les extrémités des tubes de la poignée, en vous assurant à la fois que la goupille et l'épingle sont correctement encastrées.
3. Si cela n'est pas déjà fait, enlevez le matelas du lit et placez la Barre d'Appui de Lit sur le sommier.
4. Placez la Barre d'Appui de Lit à l'endroit demandé. Voir la note annexe.
5. La Barre d'Appui de Lit est fournie avec deux sangles pour fixer entièrement le produit au sommier. Passez les deux sangles autour du sommier du lit. Faites une boucle à chaque sangle une fois autour du tube de la Barre de Lit aux coins (a) et (b).
6. Attachez les boucles en place.
7. Tirez sur les extrémités libres de chaque sangle à détendre, en vous assurant que chaque sangle est sûre et bien attachée.
8. Remplacez le matelas sur le châssis et le sommier.
9. Avant utilisation, assurez-vous que la Barre d'Appui de Lit est sûre et bien attachée.

Soin et nettoyage

Nettoyez avec un chiffon doux et, de façon générale, à l'eau tiède avec un détergent neutre. N'employez pas d'abrasifs agressifs ou des produits de nettoyage à base de javellisant qui pourraient causer des dommages ou de la décoloration.



Poids maximum de l'utilisateur

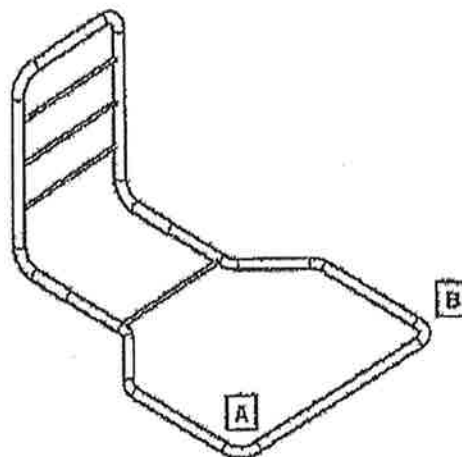

Précautions

- Cette Barre d'Appui de Lit ne doit pas être utilisée pour soutenir plus de 190 kg/418 lbs/30 st,
- Une évaluation complète des risques doit être effectuée avant utilisation de la Barre d'Appui de Lit par l'occupant (ou les occupants) du lit afin de s'assurer que tout convient,
- Quand le matelas est comprimé, l'espace entre la barre inférieure et le matelas devrait être de moins de 60mm,
- La barre ne doit pas être placée près de la tête de lit mais au centre du lit (en s'assurant que l'espace entre le bord externe de la Barre d'Appui du Lit et l'intérieur du panneau de tête/pied est supérieur à 318 mm) ce qui est confortable pour que l'utilisateur utilise le produit de façon correcte c-à-d. en s'aidant à aller et à sortir du lit,
- S'assurer que la Barre d'Appui du Lit est compatible avec le sommier et le matelas du lit,
- S'assurer que le matelas est sûr après la fixation de la Barre d'Appui de Lit,
- Avant chaque utilisation, s'assurer que les goupille-épingles et les sangles sont correctement fixées,
- Des contrôles réguliers de la Barre d'Appui de Lit doivent être faits afin de maintenir la sécurité et montrer que les barres sont en bon état d'utilisation, ne montrant aucun signe de dommages/d'usure.

Fabriqué pour Patterson Medical Ltd.
Nunn Brook Road, Huthwaite,
Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire,
NG17 2HU, UK
UK: Tel: 08444 124 330 Fax: 08448 730 1000
www.pattersonmedical.co.uk
International: Tel: +44 1623 448 706
Fax: +44 1623 448 784

Patterson Medical Products, Inc.
28100 Torch Parkway Suite 700,
Warrenville, IL 60555-3938
Tel: 1-800-323-5547 Telefax: 1-800-547-4333

71181 ls1 © Patterson Medical Ltd, 2015

Patterson Medical ANZ
Unit 3, 3 Basalt Road
Pemuwuy NSW
Australia 2145

Patterson Medical France
Zone Industrielle de Montjoly
11 avenue de l'Industrie - CS 40712
08013 Charleville-Mézières Cedex, France,
Tel: 03 24 52 61 15 Fax: 03 24 52 90 34


**PATTERSON
MEDICAL**